



«Антицеллюлит про» - портативный прибор для домашнего использования, который поможет Вам сохранить красоту и молодость тела надолго без хирургических вмешательств и инъекций. «Антицеллюлит про» своим воздействием стимулирует естественные функции кожи, способствуя обновлению, повышению ее тонуса и упругости. Использовать «Антицеллюлит про» легко, а для получения эффекта достаточного применять массажер ежедневно по 5-10 минут в той области тела, которая требует особого ухода.

### ВОЗДЕЙСТВИЕ «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ ПРО»

- Заметно разглаживает рельеф кожи
- Подтягивает контуры тела
- Придает коже здоровый вид
- Делает кожу упругой и ровной
- Сокращение проявлений целлюлита и стройное тело

### ПРЕИМУЩЕСТВА «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ ПРО»

- Портативность и легкость использования
- Идеально подходит для области рук, живота, спины, боков, ягодиц и бедер
- Съёмные насадки с массажными роликами
- Вакуумный массаж для глубоко воздействия на кожу
- Приведение в тонус мышц и снятие с них напряжения

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Руки
- Живот
- Спина и бока
- Бедра
- Ягодицы
- Ноги


### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- A - Массажер (основной прибор)
- B - Массажная насадка с двумя роликами
- C - Массажная насадка с одним роликом
- D - Адаптер на 110/220В
- E - Зарядная база для массажера




## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1) Подключите адаптер к массажеру через входной разъем (1). Подсоедините адаптер (2) к сети; убедитесь, что технические характеристики адаптера соответствуют параметрам используемой электросети.
- 2) Проверьте выключатель ON/OFF на корпусе массажера (3): во включенном состоянии (ON) загорится красная лампочка-индикатор зарядки(4).
- 3) Перед использованием массажер должен заряжаться как минимум в течение 8 часов, либо использоваться с адаптером.
- 4) Если массажер заряжается на базе (5), то на базе должна гореть зеленая лампочка-индикатор (6), а на самом устройстве - красная лампочка (4).
- 5) После подзарядки выберите нужную массажную насадку в зависимости от того, на какую область тело будет оказываться воздействию:
  - для небольших поверхностей (руки, икры, спина) используйте маленькую насадку с одним роликом (7);
  - для больших поверхностей (бедро, живот, ягодицы, ноги) пользуйтесь большой насадкой с двумя роликами (8).
- 6) Чтобы сменить насадку поверните кнопку ON/OFF (9).
- 7) Для глубокого массажа повышайте интенсивность всасывания при помощи регулирующего переключателя (10); интенсивность массажа зависит от степени чувствительности кожи.
- 8) Если во время массажа насадка не скользит по коже, используйте кнопку ускорения массажа (11).
- 9) Отключайте от источника питания после использования.

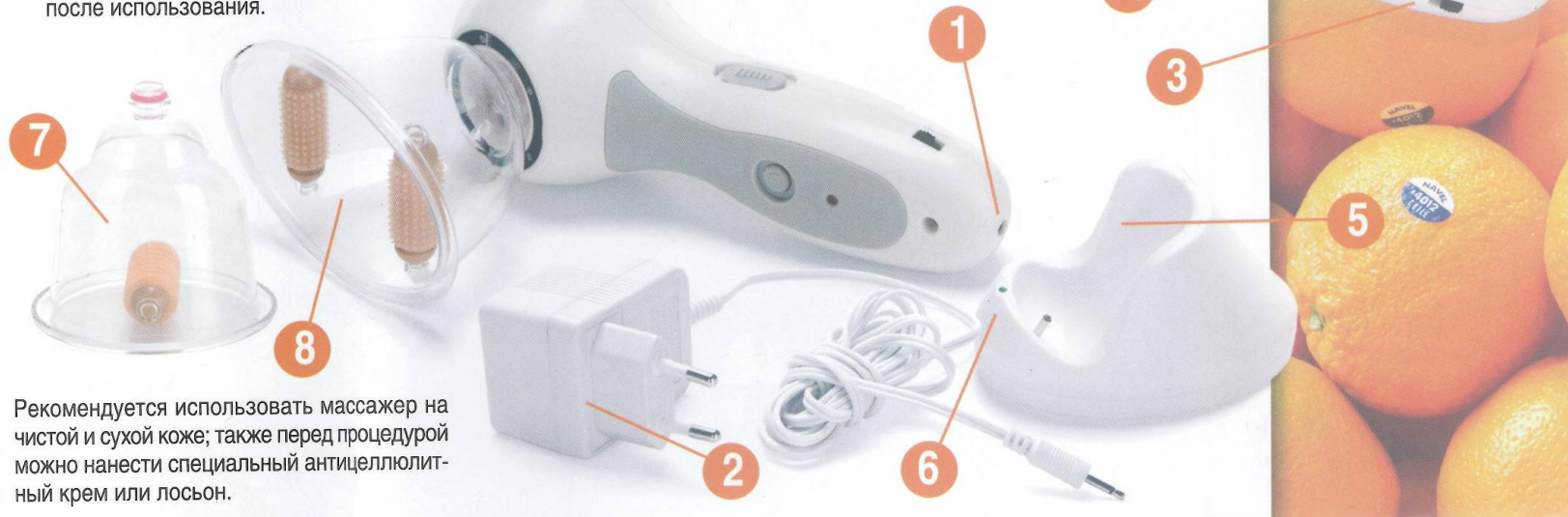

Рекомендуется использовать массажер на чистой и сухой коже; также перед процедурой можно нанести специальный антицеллюлитный крем или лосьон.

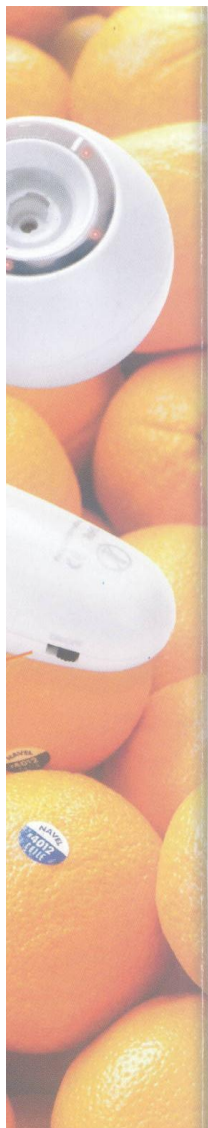

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера, если вы страдаете от каких-либо заболеваний.
- Устройство предназначено исключительно для проведения массажа, не является медицинским прибором.
- Убедитесь, что устройство находится в выключенном состоянии, прежде чем подсоединять/отсоединять его от сети.
- Всегда начинайте массаж со слабой интенсивности и постепенно увеличивайте ее.
- Не массируйте одну зону тела более 10 минут.
- Храните устройство в местах недоступных для детей.
- Не используйте массажер на местах, где есть варикозное расширение вен, родинки, бородавки, а также на поврежденной коже и пупке.
- Не используйте массажер на месте шрамов и на рубцах.
- Небольшое покраснение в области массажа является нормальным признаком.
- Запрещается самостоятельно разбирать и чинить устройство.
- **МАССАЖЕР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ!**

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети, если не пользуетесь им.
- Для зарядки устройство используйте только тот адаптер, который предусмотрен комплектацией.
- Не погружайте устройство в воду.
- После использования очищайте насадки.



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность, кормление грудью;
- варикозное расширение вен;
- онкологические заболевания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- простуда, грипп, обострение хронических заболеваний;
- болезни печени и почек;
- гипертония, ишемия;
- гинекологические заболевания;
- повышенная чувствительность кожи.

**BRADEx™**  
Beauty & Health

# АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

МАССАЖЕР  
ВАКУУМНЫЙ **ПРО**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация: массажер, зарядная база, малая насадка, большая насадка, адаптер.

Параметры адаптера: 110/220В

Общая мощность: 20 Вт

Материал: АБС-пластик, поликарбонат, металл.

**BRADEx™**  
Beauty & Health