

GÉZATONE

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ НОГ!

SKY STEPS

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ AMG718

3 В 1

МАССАЖНАЯ
СИСТЕМА



МАССАЖ ШИА-ЦУ • РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ • ПРЕССОТЕРАПИЯ • ПРОГРЕВАНИЕ • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

SKY STEPS

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

- Как часто после долгого дня Ваши ноги отекают, ноют, становятся тяжелыми и гудят?
- Эти явления связаны с множеством факторов: неудобная обувь, высокий каблук, вождение автомобиля, малоподвижный образ жизни провоцируют застой крови и лимфы в нижних конечностях.
- К сожалению, отеки и тяжесть в ногах не так безобидны, как кажется, ведь если с этим никак не бороться, то может развиваться варикозная болезнь вен.

МАССАЖЕР AMG 718 GEZATONE -
НЕЖНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ НОГ!

GEZATONE
МОДЕЛЬ AMG 718



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Если Вы ведете малоподвижный образ жизни и ощущаете тяжесть в ногах после рабочего дня!



Если Вы долгое время проводите на ногах: продавцы-консультанты, преподаватели, парикмахеры, и т.д.



Если Вы часто и подолгу находитесь за рулем.



Если Вас беспокоят отеки и одутловатость нижних конечностей.








Если Вы хотите предотвратить развитие варикоза.



Если Вы любите обувь на высоких каблуках, и при этом заботитесь о красоте и здоровье своих ног!

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

-  **МАССАЖ ШИА-ЦУ** Воздействуя на активные точки, массаж Шиаци повышает общий иммунитет, улучшает самочувствие и снимает спазм мышц.
-  **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ** через 15 минут.
Всего 15 минут массажа ног, и вы снова в отличной форме.
-  **РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ.** Три уровня воздействия на активные точки стопы производят эффект рефлексотерапии, открывают энергетические каналы.
-  **ПРЕССОТЕРАПИЯ** методика воздействия на кожу, ткани и сосуды, которая усиливает приток крови, помогает снять напряжение мышц, снимает отеки.
-  **ПРОГРЕВАНИЕ** Тепловое воздействие улучшает местное кровообращение, эффективно справляется с тяжестью ног и дискомфортом.



МАССАЖНЫЕ ЗОНЫ

Массажер для ног Gezatone «SKY STEPS» AMG 718 – быстрый способ справиться с усталостью, напряжением и стрессом.

3 МАССАЖНЫЕ ЗОНЫ

- Акупунктура пальцев
- Акупунктура передней части стопы
- Акупунктура пяток

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ НОГ!




Арт.1301160

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




Кнопка «**Разминающий массаж**»: включение/выключение разминающего массажа в ручном режиме

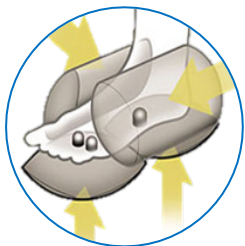

Кнопка «**Прессотерапия**»: 3 уровня выбора интенсивности сжатия в ручном режиме



Кнопка «**Авто**»: выбор одного из двух режимов автоматического массажа

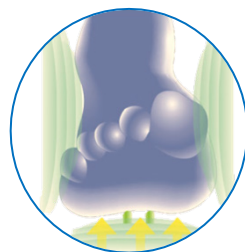

Кнопка «**Нагрева**»: выбор интенсивности нагрева (2 режима) в ручном или автоматическом режиме



Кнопка «**Питание**»: включение/выключение прибора



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устраняет тяжесть, боли и дискомфорт
- Снимает усталость и напряжение
- Борется с отеками
- Восстанавливает работоспособность
- Улучшает самочувствие и настроение



Аппарат AMG 718 имеет **стильный дизайн** и удобный корпус. Он не займет много места в Вашем доме, а Вы сможете наслаждаться приятной расслабляющей процедурой массажа ног тогда, **когда Вам этого хочется!**

SKY STEPS

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ AMG718

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ НОГ!



Аппарат AMG 718 – это 3 вида профессионального массажа в одном корпусе!


Колоссальная экономия денег на посещении массажных салонов!

Время массажа занимает всего 15 минут, после этого таймер аппарата автоматически отключается. Вам никуда не нужно ходить, тратить свое время – просто расслабьтесь, сидя в любимом кресле или на диване и наслаждайтесь!


Массаж ног с помощью аппарата AMG 718 – это отличная профилактика заболеваний суставов и варикозного расширения вен. Приятная процедура вместо походов к врачу и таблеток!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Во время беременности.
- Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор.
- При туберкулезе.
- При онкологических заболеваниях.
- При флебите или тромбозе вен.
- При диабете.
- При заболевании кожи.
- При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или штифтов внутри.
- При дисфункции суставов, таких как, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
- При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.

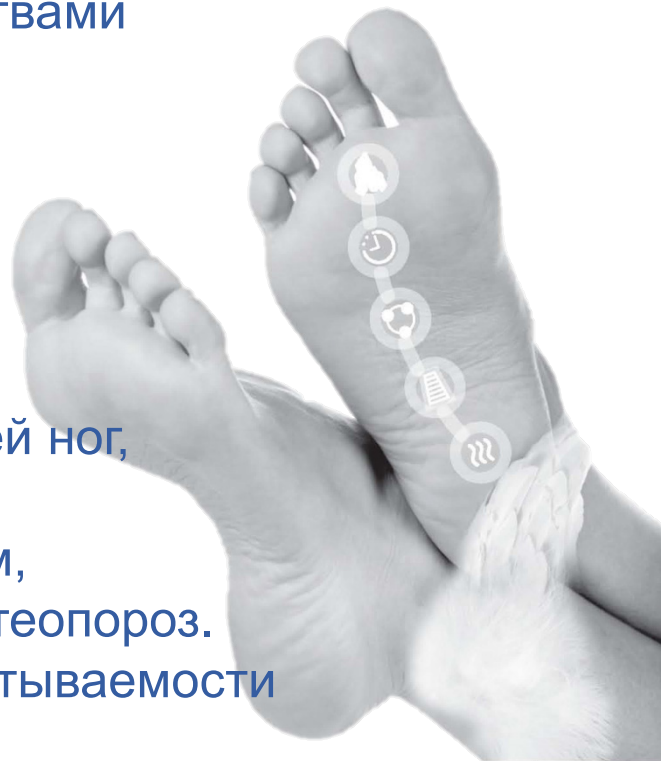

ОГРАНИЧЕНИЯ

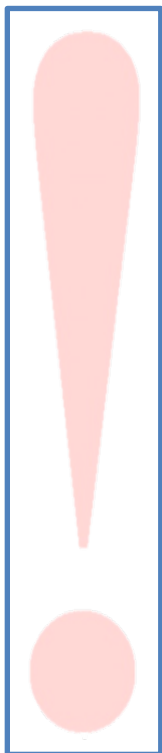

- При наличии хронических заболеваний перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми младше 12 лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: АС 220-240 В., 50 Гц. /12 В., 3 А
- Потребляемая мощность: не более 36 Вт
- Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.)
- Размеры: 480 мм X 230 мм X 360 мм
- Вес: 5,2 кг
- Температура хранения: 15-85°C
- Диапазон рабочих температур: от +10°C до +40°C при влажности от 0 до 65%
- ШК EAN13 3004564029702
- Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.
Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция.

