

REDMOND

Весы напольные
RS-728B



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND – это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

Весы **REDMOND** – это высокоточные приборы для домашнего использования. Они станут незаменимым помощником для контроля массы тела.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	5
Технические характеристики.....	5
Устройство модели.....	6

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры безопасности.....	7
Перед первым включением.....	8

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ

Режим простого взвешивания.....	9
Режим взвешивания с индикацией параметров телосложения.....	10

III. ОЧИСТКА И УХОД.....14

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....15

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....17

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Весы	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Сервисная книжка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RS-728B
Тип прибора	электронные напольные весы с индикацией параметров телосложения
Источник питания	3хAAA
Диапазон измерений	1-150 кг
Интервал измерений	100 г
Количество датчиков	4
Электронное сенсорное управление	+
Подсветка дисплея	+
Индикация перегрузки	+
Выбор единицы измерения	+
Количество ячеек памяти	8
Функция автоматического включения	+
Функция автоматического отключения	+

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ
ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕК-
ТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ
ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Платформа весов
2. Индикация номера пользователя ячейки памяти
3. Индикация ввода возраста пользователя
4. Индикация ввода аналитического режима
5. Индикация веса
6. Индикация единицы измерения роста
7. Индикация единицы измерения веса
8. Индикатор режима FAT
(содержание жировой ткани)
9. Индикация параметров телосложения
(содержание влаги)
10. Индикация режима TBW
11. Индикация режима MUS
(содержание мышечной ткани)
12. Индикация состояния телосложения
(худое, нормальное, полное, очень полное)
13. Сенсорная кнопка LEFT («влево»)
14. Сенсорная кнопка SET («установка»)
15. Сенсорная кнопка RIGHT («вправо»)
16. Индикация режима BONE
(содержание костной ткани)



I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Прибор предназначен только для бытового использования. **Прибор не предназначен для промышленного использования.**

■ Не разрешается использование прибора детьми, пока им не будут объяснены и не станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детьми в качестве игрушки.**

■ Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. **Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам, повреждению имущества и потере гарантии.**

■ Используйте элементы питания только указанного типа.

Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.

■ Запрещается погружение прибора в воду и любые жидкости. **Это может привести к повреждениям.**

Запрещена эксплуатация весов в следующих случаях:

■ В помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. **Существует опасность неисправности прибора из-за попадания влаги внутрь.**

■ На открытом воздухе. **Существует опасность выхода из строя прибора.**

■ Мобильный телефон может создавать помехи, в след-

ствие чего возможны неточные результаты взвешивания.

■ Держите включенный мобильный телефон на расстоянии не менее двух метров от весов или выключите мобильный телефон.

Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус прибора, после чего просушите.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ РУКИ И УСТРОЙСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ.

3. Перед использованием убедитесь, что элементы питания установлены в прибор.
4. Если элементы питания не установлены – установите их:
 - снимите крышку отсека для элементов питания и установите элементы питания, соблюдая полярность
 - после установки закройте крышку отсека.



II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ

РЕЖИМ ПРОСТОГО ВЗВЕШИВАНИЯ



1. С помощью переключателя единиц измерения выберите необходимую:

kg – килограмм

lb – фунт

st – стоун (14 фунтов)



2. Установите весы на ровную твердую поверхность. Это условие является обязательным – оно позволяет получать точные результаты.



3. Весы снабжены системой автоматического включения, для включения весов достаточно просто встать на платформу.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для получения точного измерения веса необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

1. Устанавливайте весы только на ровную твердую поверхность.
2. Вставляйте на платформу весов плавно.
3. Не переносите центр тяжести с одной ноги на другую.
4. Во время взвешивания избегайте резких движений и покачиваний.



4. На дисплее будет отображено значение Вашего веса.



5. По окончании взвешивания – сойдите с платформы весов. Весы отключатся автоматически.



6. При перегрузке на весы (свыше 150 кг), на дисплее появится сообщение «----».

РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

1. С помощью переключателя единиц измерения выберите необходимую:

kg – килограмм

lb – фунт

st – стоун (14 фунтов)

2. Установите весы на ровную твердую поверхность. Это условие является обязательным – оно позволяет получать точные результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для получения точного измерения веса необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

1. Устанавливайте весы только на ровную твердую поверхность.
2. Вставляйте на платформу весов плавно.
3. Не переносите центр тяжести с одной ноги на другую.
4. Во время взвешивания избегайте резких движений и покачиваний.



3. Нажмите на кнопку **SET**, после чего с помощью кнопок **SET** и **RIGHT** установите номер ячейки (от 1 до 8) памяти, в которой хотите сохранить Ваши личные данные.

P1 – ячейка №1

P2 – ячейка №2

Для подтверждения ввода и перехода к следующему параметру нажмите **SET**.

4. С помощью кнопок **LEFT** и **RIGHT** выберите аналитический режим:



- режим для мужчин.



- режим для мужчин, регулярно занимающихся спортом.



- режим для женщин.



- режим для женщин, регулярно занимающихся спортом.



5. Для подтверждения ввода и перехода к следующему параметру нажмите **SET**.



6. С помощью кнопок **LEFT** и **RIGHT** введите свой рост, в см. Для подтверждения ввода и перехода к следующему параметру нажмите **SET**.



7. С помощью кнопок **LEFT** и **RIGHT** введите свой возраст. Для подтверждения ввода и перехода к взвешиванию нажмите **SET**.



8. После ввода всех персональных данных, дождитесь, пока на дисплее появятся нули.

9. Встаньте на весы – на дисплее отобразится Ваш вес.

10. После того как на дисплее зафиксируется значение Вашего веса, начнется аналитический процесс по определению параметров Вашего телосложения.



11. По окончании аналитического процесса на дисплее будут отображены параметры Вашего телосложения:

Содержание жировой ткани



Содержание влаги



Содержание мышечной ткани



Содержание костной ткани



11. По окончании отображения параметров телосложения весы отключатся автоматически.

III. ОЧИСТКА И УХОД

1. Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.
2. Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.
3. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает.	Прибор не включен. Емкость элементов питания иссякла.	Включите прибор, встав на платформу весов. Замените элементы питания согласно разделу «ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ».
Показания дисплея не соответствуют истинному значению.	Выбрана неверная единица измерения веса. Не соблюдены обязательные условия взвешивания.	С помощью переключателя выберите необходимую единицу измерения веса. Для получения точного значения веса необходимо соблюдать ряд обязательных условий: 1. Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность. 2. Вставляйте на платформу весов плавно. 3. Не переносите центр тяжести с одной ноги на другую. 4. Во время взвешивания избегайте резких движений и покачиваний.
Прибор автоматически отключается.	Сработала система автоматического отключения прибора.	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектация изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты и т. д.)

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2-х лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор нужно утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов.
Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



Чайник
RK-M107



Чайник
RK-M112



Чайник
RK-M113



Чайник
RK-M114



Чайник
RK-M118



Чайник
RK-M119



Чайник
RK-M120D



Чайник
RK-M121D



Чайник
автомобильный
RKA-M3601



Термопот
RTP-M801



Тостер
RT-402



Тостер
RT-M403



Бутербродница
RSM-M1402



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-1602



Соковыжималка
RJ-M900



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-903



Соковыжималка
RJ-M906



Соковыжималка
RJ-907



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Блендер
RHB-2910



Кухонный комбайн
RFP-3903



Измельчитель
RCR-3801



Миксер
RHM-2101



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Мясорубка
RMG-1204



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Пароварка
RST-M1105



Пароварка
RST-M1106



Мультиварка
RMC-M4501



Мультиварка
RMC-M4502



Мультиварка
RMC-4503



Мультиварка
RMC-M4504



Мультиварка
RMC-M4505



Мультиварка
RMC-M10



Мультиварка
RMC-M20



Мультиварка
RMC-M40



Мультиварка
RMC-M60



Мультиварка
RMC-M70



Хлебопечь
RBM-M1902



Хлебопечь
RBM-1904



Хлебопечь
RBM-1905



Микроволновая
печь
RM-M1006



Микроволновая
печь
RM-M1007



Йогуртница
RYM-M5401



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Пылесос
RV-312



Пылесос
RV-S314

Fashion style



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Фен
RF-509

Professional series



Фен
RF-513



Мультистайлер
RMS-4301



Мультистайлер
RMS-4302



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Фен
RF-503



Фен
RF-510



Фен
RF-511



Выпрямитель
RCI-2306



Выпрямитель
RCI-2308



Выпрямитель
RCI-2310



Выпрямитель
RCI-2311



Весы напольные
RS-707




Весы напольные
RS-708



Весы напольные
RS-710



Весы напольные
RS-713

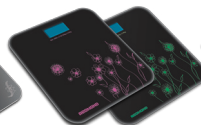

Весы напольные
RS-715



Весы напольные
RS-719



Весы напольные
RS-723B



Весы кухонные
RS-M711



Весы кухонные
RS-712



Весы кухонные
RS-M718



Весы кухонные
RS-M720



Весы кухонные
RS-721



Весы кухонные
RS-722



Весы кухонные
RS-724



Весы кухонные
RS-725



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-A212



Очиститель
воздуха
RAC-3702



Очиститель
воздуха
RAC-3703



Очиститель
воздуха
RAC-3704



Увлажнитель
воздуха
RHF-3302



Увлажнитель
воздуха
RHF-3303



Увлажнитель
воздуха
RHF-3305



Пароочиститель
RSC-2010



Обогреватель
RFH-V4205F



Обогреватель
RFH-V4206



Вентилятор
RAF-M5002



Маникюрный
набор
RNC-4901



Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA
www.redmond-ig.com
www.redmond-rus.com
Made in P.R.C