

SUPRA

Руководство по эксплуатации

МАССАЖЕР МАГНИТНО-ФОТОНОВЫЙ
МЕЗОРОЛЛЕР
MFS-113



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение щётки для волос с ионизатором SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если устройство перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство прибора.....	4
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка прибора.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Массажер предназначен для массажа отдельных частей человеческого тела в домашних условиях. Запрещается использовать массажер в коммерческих целях.

Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым адаптером. Если поврежден сетевой адаптер, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Массажер предназначен для использования внутри помещения.

Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

Запрещается погружать сетевой адаптер или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).

Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать его из воды.

Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.

Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

Запрещается разбирать и пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. Запрещается использовать прибор беременным женщинам.

Не используйте прибор на инфицированной коже.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон - 1

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА



1. Красный индикатор светодиода с инфракрасным лучом способствует выработке коллагена и эластина и поддерживает кожу влажной и упругой.
2. Массаж шариками из магнетита улучшает циркуляцию крови и снимает мышечное утомление.
3. Кожа оздоравливается с помощью массажа антибактериальными никелевыми шариками в количестве 9 шт.

4. Массаж после нанесения крема ускоряет абсорбцию кожи.
5. Не наносит ущерба окружающей среде благодаря функционированию без батареи.

Нет ограничений по использованию массажера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



1. Массируйте кожу массажным валиком, совершая движения вверх-вниз.
2. Массируйте кожу лица, шеи, живота и всего тела.
3. Массируйте кожу лица и тела ежедневно.

Массаж лица

1. Массируйте кожу лица массажным валиком, перемещая прибор от подбородка к щекам.
2. Массируйте чистое лицо в течение 10-минутных интервалов.
3. Массируйте кожу лица ежедневно, чтобы кожа лица была упругой.

Массаж декольте


1. Очистите кожу и подготовьте к процедуре с помощью специальных очищающих средств.
2. Нанесите крем-лифтинг и до полного впитываения проведите массажными движениями по декольте
3. Нанесите питательный крем и опять повторите процедуру массажа.
4. Удалите излишки крема.
5. Повторяйте данную процедуру 2-3 раза в неделю.



!Внимание! Важно помнить, что в зоне декольте очень тонкая и нежная кожа, чуть меньше миллиметра. Воздействовать на нее нужно аккуратно, без сильных щипков и надавливаний, чтобы не повредить твою грудь. Любое растягивание кожи может легко привести к синякам.

Массаж антицелюлитный

1. Очистите кожу специальным очищающим гелем или другим средством.
2. На очищенную кожу нанесите антицелюлитный крем и до полного высыхания проведите процедуру по массажным линиям как на рисунке

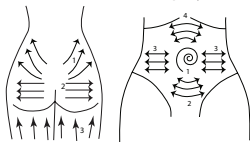

3. Повторяйте процедуру каждый день курсом 3 месяца. При необходимости повторите курс через 1 месяц для закрепления результата.

ЧИСТКА И УХОД



1. Чистите влажной или сухой тканью или бумажными салфетками после каждого использования, если прибор загрязнился.
2. Не мойте прибор под водой.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Дата производства: 10.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____
Модель: _____
Версия: _____
Дата: _____

S/N: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

