



TOUCHBeauty

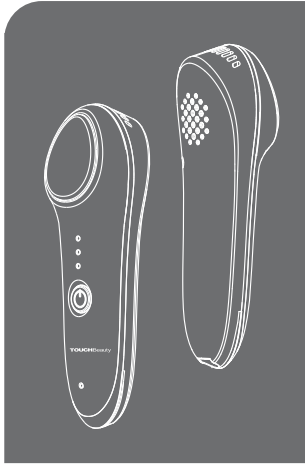

ПРИБОР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

AS-1389

INSTRUCTION MANUAL

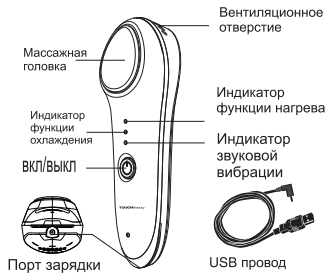

Особенности:

1. Устройство имеет 2 функции: горячий массаж и холодный массаж совместно с вибрационным ультразвуковым массажем, благодаря чему кожа выглядит более гладкой, более эластичной и более свежей.
 - Горячий массаж при температуре нагрева до 42 °C увеличивает циркуляцию крови и помогает лучше усваивать продукты ухода за кожей.
 - Холодный массаж: при 6 °C подтягивает кожу и сужает поры, улучшает текстуру кожи и уменьшает количество морщин.
 - Ультразвуковая вибрация: используется совместно с функциями нагревания и охлаждения.
2. Массажная головка повторяет каждый изгиб вашего лица, что делает высокоэффективным уход за кожей.
3. Система автоотключения: 2,5 минуты для каждой установки.
4. Мини размер, портативный, легко помещается в косметичке.
5. Подходит для всех типов кожи.



Как зарядить устройство:

1. Полная зарядка занимает всего 3 часа. Устройство может работать непрерывно в течение 1 часа после того, как полностью заряжен.
2. Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, затем подключите к компьютеру.
3. Индикатор горит красным во время зарядки и синим при полной зарядке.



Как пользоваться:

1. Нажмите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, удерживайте в течение 3 секунд, индикатор функции горячего массажа станет красным. Нажмите ВКЛ / ВЫКЛ переключатель во второй раз и загорится желтым индикатор вибрации. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в третий раз, чтобы загорелся синим индикатор функции охлаждения. Нажмите Вкл / Выкл в четвертый раз, чтобы вновь загорелся желтым индикатор функции вибрационного массажа.
 - Чтобы выключить, нажмите ВКЛ / ВЫКЛ и удерживайте в течение 3 секунд, или ожидаете автоматического выключения после 2,5 минут в каждом режиме.
 - "Звуковой сигнал" раздается, когда устройство переключается из одного режима в другой.

2. При использовании устройства применяйте омолаживающие средства для вашей кожи (включая районы вокруг глаз), двигайтесь круговыми движениями изнутри наружу, снизу вверх, так как идет изменение текстуры кожи.

Шаги для ежедневного использования:

- Шаг 1: Увеличение эффекта поглощения кожей питательных веществ при применении продуктов по уходу за кожей, чтобы кожа выглядела более молодой и гладкой. После очистки лица, нанесите питательный крем для лица или лосьон и используйте горячий массаж с режимом звуковой вибрации для обеспечения более эффективного поглощения кожей косметических продуктов.
- Шаг 2: подтягивает и защищает кожу. После процедуры ухода и горячего массажа с питательными кремами, используйте Прохладный Массаж с режимом звуковой вибрации. Это поможет свести к минимуму раскрытые поры и подтянет овал лица. Функция идеально подходит для нанесения продуктов макияжа.
- * Переменные режимы Горячего и Прохладного Массажа используются для гладкости и сияния кожи.

Как очистить

1. Протрите массажную головку и основной корпус мягкой тканью после каждого использования.
2. Не мойте его под водой.

Предупреждение:

1. Беременные женщины и лица с воспалениями, с солнечными ожогами или тяжелыми заболеваниями акне не должны использовать этот прибор.
2. Лицам, имеющим аллергию, не рекомендуется использовать этот продукт
3. Основной корпус не является водонепроницаемым.
4. Хранить в прохладном и сухом месте.
5. Хранить в недоступном для детей месте.
6. НЕ разбирайте прибор, если Вы не профессионал.

Устранение неисправностей

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Нет зарядки	Зарядите прибор
	Низкая зарядка	Зарядите прибор
Эффект не очевиден	Кожа не является чистой	Используйте прибор на чистую кожу
	Использовали по времени недостаточно долго	Следуйте инструкции

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

СОВЕТЫ:

	Функция	Применение
УТРО	Холодный массаж + вибрационный массаж	Снимает отечность глаз
		Используйте перед нанесением макияжа, поры не откроются, макияж будет хорошо держаться.
ВЕЧЕР	Горячий массаж + вибрационный массаж	Используйте после нанесения макияжа, макияж ляжет равномерно.
		Используйте совместно с маской для лица после очистки для лучшего усвоения питательных веществ.
	Переменный режим холодного и горячего массажа совместно с ультразвуковым массажем	Используйте при необходимости, чтобы омолодить кожу лица, закрыть поры или вернуть сияющий вид.

ПРИБОР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-1389

Material: ABS, Stainless steel
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
 Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixu Road,
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书		业务包材设计		
尺寸	300*100mm		订单号	国外说明书	编号
材质	80g书写纸	型号	AS-1389	日期	2013-12-23
工艺	单黑双面		单位	设计	周苏辉
其它	风琴5折后50*100mm (成品)		毫米		