


Прибор для омоложения кожи вокруг глаз

TB-1188

INSTRUCTION MANUAL

STRUCTURE:

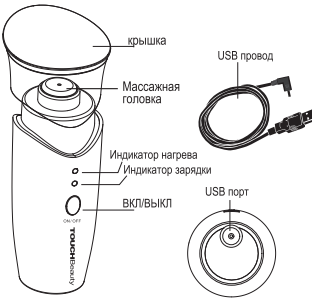

Особенности:

- Сочетание теплого массажа и вибрации, что способствует улучшению кровообращения вокруг глаз и делает глаза ярче и более привлекательным.
- Акустическая массажная головка производится из гипоаллергенных материалов, безопасна для всех типов кожи.
- Используйте вместе с продуктами по уходу за кожей и увеличивает их эффект.
- Мини размер, портативный.
- Интеллектуальная система синхронизации: 3 минут для каждого параметра.
- Зарядка от USB.

Как заряжать:

- Всего 3 часа необходимо, чтобы зарядить прибор полностью. Устройство может работать непрерывно в течение 1 часа после полной зарядки.
- Подключите провод USB в USB порт в корпусе прибора и подключитесь к компьютеру.
- Индикатор загорится красным при зарядке и синим, когда прибор будет полностью заряжен.

• Как пользоваться:

- Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ удерживайте в течение 3 секунд, Индикатор загорится красным и начнет мигать, режим нагрева запускается.
- Красный индикатор перестает мигать, когда температура достигает 40 °C и прибор готов к работе.
- Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ переключатель во второй раз, и второй режим - вибрация активируется.
- Нажмите переключатель ON / OFF в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство или ждите автоматического выключения через 3 мин. после непрерывной работы.

• Ежедневное применение:

Шаг первый: для ежедневного ухода, чтобы снять усталость. Когда вы чувствуете, что ваши глаза становятся сухими усталыми, применяйте теплый массаж вокруг глаз и областей вдоль бровей.

Шаг второй: теплый массаж способствует усвоению питательных веществ.

После нанесения крема для глаз на кожу вокруг глаз, начните теплый массаж в соответствии с текстурой кожи: изнутри наружу и снизу вверх. Всего необходимо 3 минуты для лучшего усвоения крема.

• Как ухаживать за прибором:

Протирайте основной корпус прибора мягкой тканью после каждого использования.

ВНИМАНИЕ!

- Хранить вдали от высокой температуры, влажных мест и огня;
- Хранить в недоступном для детей месте;
- НЕ разбирайте устройство, если вы не профессионал.

Устранение неисправностей:

Устройство не работает.
Низкий заряд батареи. Проверьте зарядку и зарядите прибор заново.
Неудовлетворительный результат.
Прибор использовался недостаточное количество времени. Пожалуйста, следуйте инструкции.

Советы:

- Не пейте воду за полчаса до сна, это может влиять на кровообращение вокруг глаз и вызывать раздражение глаз, образовывать мешки под глазами.
- Тщательно удаляйте макияж, чтобы лучше защитить кожу вокруг глаз.
- Чай содержит дубильные вещества, используйте чай для компрессов, это поможет вам иметь ясный взгляд и свежий вид.

www.touchbeauty.com

Name: Прибор для омоложения кожи вокруг глаз

Модель: TB-1188

Material: ABS

Executive Standard:


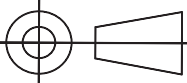
Distributor: Shenzhen TOUCHBeauty Co., Ltd.

Address: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Address: Pingshan New District, Shenzhen, China 518100

Hotline: 400-0389-600 Fax: 0086-755-3366 8880

名称	说明书	 <p>深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.</p>	业务包材设计		
尺寸	250*100mm		订单号	英文说明书	编号
材质	80g书写纸	型号	TB-1188	日期	2015-1-16
工艺	单黑双面		单位	设计	杨婷
其它	风琴4折后50*100mm (成品)		毫米		