

Уважаемый клиент,

Мы поздравляем Вас и благодарим за покупку этого высококачественного продукта. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, чтобы как можно лучше использовать прибор. Эта инструкция содержит все необходимые указания и рекомендации по использованию, очистке и техническому обслуживанию прибора. Если следовать этим указаниям, то мы гарантируем замечательный результат, экономно времени и отсутствие проблем. Мы надеемся, что использование данного прибора доставит Вам удовольствие.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, перед тем, как начать пользоваться прибором, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Тщательно сохраняйте эту инструкцию, гарантийный талон, счет и, если можно, коробку с упаковочным материалом.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением лица, отвечающего за безопасность, или получили от него указания, как пользоваться прибором.
- При игнорировании указаний по безопасности изготовитель ответственности за ущерб не несет.
- Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электроприбором, следует следить за тем, чтобы прибор никогда не оставался без присмотра. Поэтому для хранения прибора Вы должны выбрать недоступное для детей место. Следите за тем, чтобы кабель не свешивался вниз.
- Этот прибор может применяться только для бытовых целей и только для того, для чего он был изготовлен.
- Прибор необходимо ставить на ровную, устойчивую поверхность.
- Обращайтесь с весами осторожно, так как речь идет о точном измерительном приборе. Не падайте и не прыгайте на них.
- Не помещайте на веса все более 180 кг, чтобы их не повредить.
- При транспортировке или в то время, когда они не используются, храните весы в горизонтальном положении.

ВЕСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:


- Дети младше 10 лет и взрослые старше 85 лет
- Лица с симптомами лихорадки, отеками и остенопорозом
- Лица, которые проходят лечение диализом
- Лица с сердечным стимулятором
- Лица, принимающие сердечные лекарства
- Беременные
- Спортсмены, которые ежедневно интенсивно занимаются спортом более 5 часов
- Лица с частотой сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту

БАТАРЕИ


- Не подвергать батареи воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей. Никогда не бросать батареи в огонь. Существует опасность взрыва!
- Не давать батареи в руки детям. Это не игрушка!
- Не вскрывать батареи с применением силы.
- Избегать контакта с металлическими предметами (кольцами, иглами, шурупами и т.п.). Существует опасность короткого замыкания!
- Следствием короткого замыкания может быть значительный нагрев батарей или даже возгорание. Это может привести к ожогам.
- Для Вашей безопасности полюса батарей во время транспортировки должны быть закрыты клейкой лентой.
- Если батарея потечет, не следует дотрагиваться до жидкости. Ее следует тщательно смыть и при необходимости промыть глаза чистой водой. Если симптомы останутся, обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Контактная поверхность
2. Дисплей
3. Кнопка "Назад"
4. Кнопка "Вперед"
5. Кнопка настройки

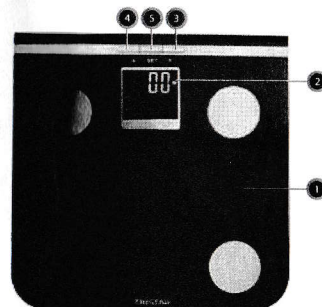

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Kt/фунт/стоун	Вес тела
PO-9	Ячейка памяти для пользователя
	Мужчина
	Женщина
CM(FT:ln)	Рост
Age	Возраст
FAT	Индикация жира в организме
TBW	Индикация воды в организме
MUS	Индикация мышечной массы
BONE	Индикация костной массы
%	Доля в процентах жира / воды в организме / мышечной массы / костной массы

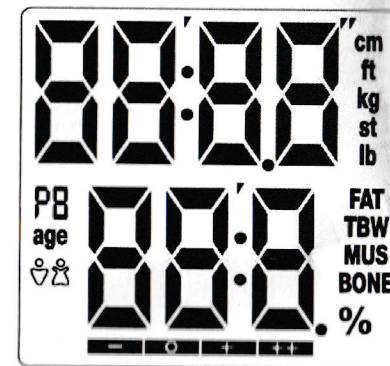

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

- Выньте прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- Прибор будет работать правильно только в том случае, если Вы встаете на контактную поверхность босыми, сухими ногами!
- Основной принцип этого прибора основан на измерении электрического импеданса в организме человека. Чтобы определить действительные параметры организма, прибор проводит слабый, незаметный электрический сигнал через Ваше тело.
- Этот сигнал, в основном, безопасный! Прочитайте, пожалуйста, наши специальные указания по безопасности!
- Метод измерения называется "биоэлектрическим анализом импеданса" (BIA), фактор, который основан на соотношении между процентными долями веса тела и относящейся сюда воды в организме, а также других биологических параметров (возраст, пол, вес тела).
- Есть лица с большим весом с хорошо уравновешенной долей жира и мышечной массы, и есть худые лица с существенно высокой долей жира в организме. Жир является фактором, который серьезно нагружает организм и, в частности, сердечнососудистую систему. Поэтому контроль обоих параметров (жира и веса) является основным условием для здоровья и фитнеса.

ПРИМЕНЕНИЕ

- На заводе на весах установлены единицы измерения "кг" и "см". Чтобы изменить настройку "фунт" или "кг" и "фунтовой", действуйте следующим образом: На обратной стороне весов рядом с отсеком для батареи находится переключатель. Нажмите на этот переключатель и выберите между kg/lb/st.

ФУНКЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

- Поставьте весы на твердую, ровную поверхность (ковров следует избегать). Неровный пол приводит к неточным результатам измерения.
- Встаньте обеими ногами на весы. Прибор автоматически включается.
- Распределите свой вес равномерно и подождите, пока весы не определят Ваш вес.
- Цифры на дисплее мигают до того момента, как будет показан точный вес.
- Чтобы продлить срок службы батарей, прибор автоматически отключается через 10 сек. после того как Вы сошли с весов.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Весы имеют стандартные значения, которые можно изменить в соответствии со следующим описанием.
- Выполните последовательно следующие шаги с интервалом в пару секунд, иначе прибор прервет режим ввода данных автоматически.
- Нажмите клавишу SET. На дисплее начинает мигать ячейка памяти (PO). Подтвердите настройку, нажав SET, или выберите другую ячейку памяти, нажимая на кнопки AUF/AB (вперед/назад) и нажав в заключении кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.
- Мигает символ "мужчина" или "женщина". Подтвердите настройку, нажав SET, или выберите, нажимая на кнопки AUF/AB, символ для Вашего пола и нажав в заключении кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке.
- Мигает настройка роста. Выберите Ваш рост, нажимая кнопку "вперед" или "назад". Если одну из двух кнопок держать постоянно нажатой, процесс ускоряется. Подтвердите ввод нажатием SET.
- Мигает настройка ВОЗРАСТ. Выберите Ваш возраст, нажимая кнопку "вперед" или "назад". Если одну из двух кнопок держать постоянно нажатой, процесс ускоряется. Подтвердите ввод нажатием SET.
- Прибор будет работать правильно только в том случае, если Вы встаете на контактную поверхность босыми, сухими ногами. При необходимости протрите контактную поверхность, чтобы улучшить результаты.
- Из-за существенных колебаний жира в организме оптимальное время тестирования между 18 и 20 часами, так как жир в организме в этот период времени является наиболее стабильным.
- Нажмите клавишу SET, мигает номер пользователя (P0-P9). Выберите с помощью кнопок "вперед" или "назад" Ваши предварительно установленные данные.
- Подождите, пока номер пользователя перестанет мигать.
- Встаньте обеими ногами на контактную поверхность.
- Сначала на дисплее мигает Ваш вес.
- Через несколько секунд показываются следующие результаты.
- Доля жира в % (FETT символ)
- Анализ результатов в форме диаграммы.
- Доля воды в организме в % (TBW символ)
- Доля мышечной массы в % (MUS символ)
- Доля костной массы в % (BON символ)

ОШИБКИ

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, подождите, пока прибор отключится. Включите его снова, чтобы вновь начать его работу. Если сообщение об ошибке не исчезает, выньте батарею из отсека примерно на 10 секунд.

- 8888 = Автотест (при включении) для проверки, правильно ли работают цифровые функции индикации.
- ---- = Весы установлены неправильно.
- Err = Процентная доля жира в организме ниже или выше предельных значений весов.
- EEEE = Вес выше максимально допустимого.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Очистите прибор влажной тряпкой. Никогда не используйте острые или абразивные очистители, средства для чистки кастрюль или стальную пуданку, которые повредят прибор.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Этот прибор был разработан, изготовлен и выведен на рынок в соответствии с целями безопасности Директив по низковольтному оборудованию № 2006/95/EU, требованиями по безопасности Директив по электромагнитной совместимости 2004/108/EU "Электромагнитная совместимость" и требованиями Директив 93/68/EEC.