




Прибор
по уходу за кожей лица
WELSS WS 7030

WS 7030



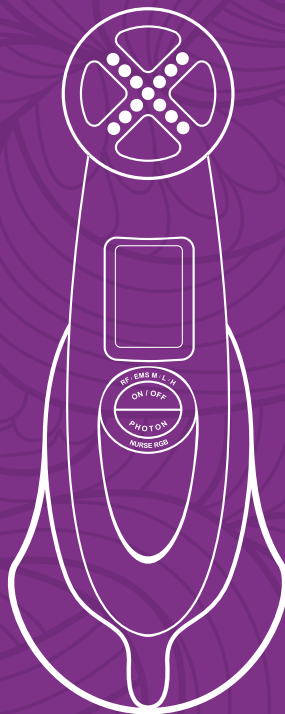

Продукция компании WELSS –
это ваш собственный косметологический салон!

Благодарим Вас за выбор данного продукта.

Руководство пользователя по эксплуатации прибора по уходу за кожей лица WELSS WS 7030

Перед использованием нужно внимательно прочитать эту инструкцию

Оглавление

Процедуры.....	4
Электропорация.....	4
Электромиостимуляция (EMS).....	4
Радиочастотный лифтинг (RF)	4
Ультрафонофорез.....	5
Квантовая терапия	5
Устройство.....	9
Предупреждение.....	10
Противопоказания.....	10
Технические характеристики.....	11

Процедуры

Электропорация

Дает потрясающий эффект при введении питания и уходе за кожей. Представляет собой косметическую процедуру, которая позволяет вводить коллаген и гиалуроновую кислоту глубоко под кожу без использования игл. Макромолекулярные компоненты, такие как коллаген и гиалуроновая кислота не могут проникать глубоко под кожу, однако, с помощью этой специальной технологии, которая называется «электропорация», можно безболезненно достигнуть высокого уровня эффективности. К тому же эта технология дает замечательный отбеливающий и антивозрастной эффект.

Электромиостимуляция (EMS)

Укрепляет и тонизирует лицевые мышцы. Процедура эффективна и достаточно проста. Электромиостимуляция вызывает сокращение мышц, которое воспринимается как легкое приятное покалывание. При этом достигается эффект активизации клеток, происходит регенерация коллагена, что способствует разглаживанию морщин. Данная процедура устраняет бледность и обвислости, помогает в борьбе с атрофией кожи.

Радиочастотный лифтинг (RF)

Представляет собой современное неинвазивное (безоперационное) омоложение кожи. Обработка радиочастотной энергией является одним из последних и широко применяемых достижений в эстетической медицине. Эффект от проведения радиочастотного лифтинга сравним с пластической операцией, а в некоторых аспектах его значительно превосходит.

RF-лифтинг заключается в контактном воздействии высокочастотного электрического тока для контролируемого прогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки. Радиочастотный лифтинг лица включает проведение процедуры в области скул и

щек, сокращение носогубных складок и морщин вокруг рта, подтяжку и укрепление контуров нижней части лица и шеи, уменьшение «второго подбородка». Кроме омоложения лица, радиочастотный лифтинг эффективен для подтяжки груди и улучшения кожи в зоне декольте.

Ультрафонофорез

Повышает активность воздействия препаратов, способствует их глубокому проникновению, увеличивает срок их действия. Поэтому наиболее эффективно использовать Прибор по уходу за кожей лица WELSS WS 7030 совместно со специальной косметикой по уходу за лицом, разработанной специалистами WELSS.

Применение ультрафонофореза дает ощутимый положительный результат при многих процедурах, в том числе:

Профилактика и уменьшение морщин.

Улучшение тонуса и эластичности кожи лица, шеи и декольте.

Реабилитация после хирургического лечения возрастных изменений лица и шеи.

Лечение рубцов.

Квантовая терапия

Терапия Bio RED - индикатор красного цвета, из 4 светодиодов, длина волны 625+/-3нм. В данном режиме массажер WELSS способствует смягчению и отбеливанию кожи, осветлению пигментных пятен, разглаживанию мимических морщин, сужению пор, накоплению протеина и коллагена.

Терапия Bio BLUE - индикатор синего цвета, из 4 светодиодов, длина волны 465+/-3нм. В данном режиме массажер WELSS способствует снижению воспаления, ускорению регенерации тканей, устранению угревой сыпь, лечению акне, разглаживанию рубцов и растяжек.

Терапия Bio Green - индикатор зеленого цвета, из 4 светодиодов, длина волны 565+/-3нм.

В данном режиме массажер WELSS способствует восстановлению, обезвреживанию

и выведению токсинов из кожи, улучшает ток крови и лимфы, что снимает отеки и придает вашей коже здоровой сияющий цвет.

Во время квантовой терапии рекомендуется надевать защитные очки. Каждая процедура занимает не более 10 минут.





Обработка чувствительных зон:













Уход за кожей вокруг глаз	Уход в области носогубной части лица	Уход в области декольте
2 минуты	2 минуты	2 минуты












! Важно! Избегайте области щитовидной железы.

Направления массажных линий


- Ноги (передняя часть) – 5 мин
- Ноги (задняя часть) – 5 мин
- Талия – 5 мин
- Руки – 5 мин
- Бедро – 5 мин
- Живот – 5 мин

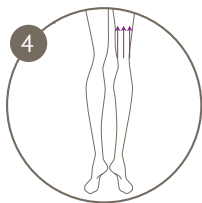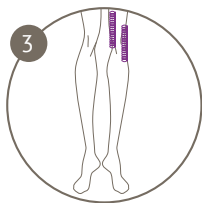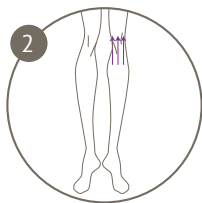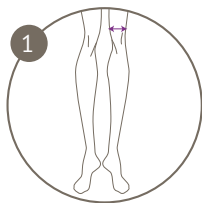

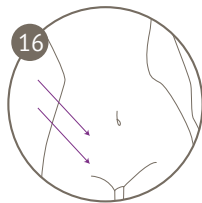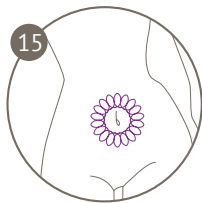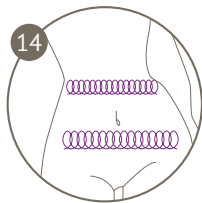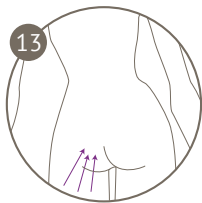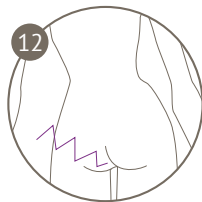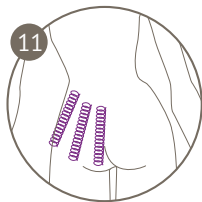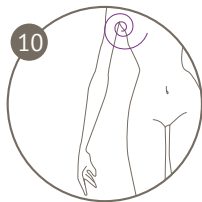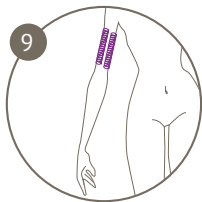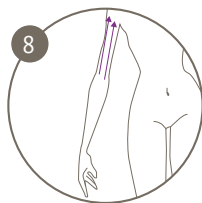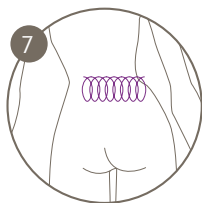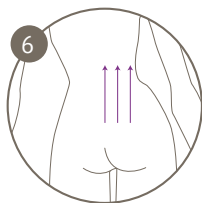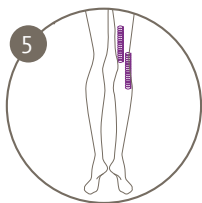

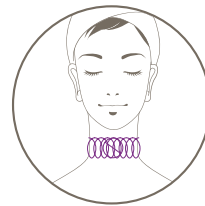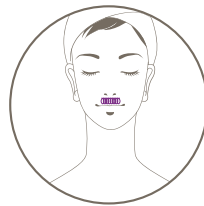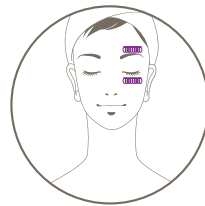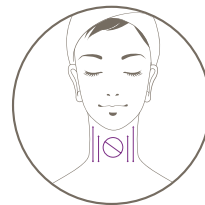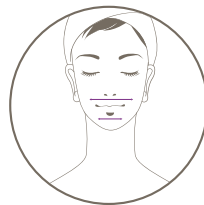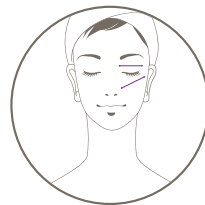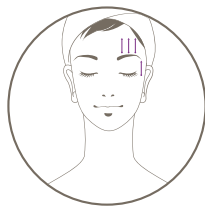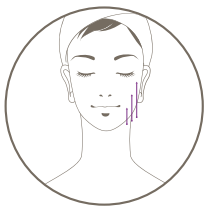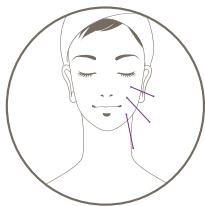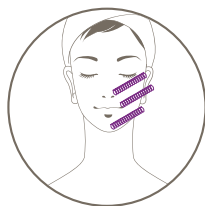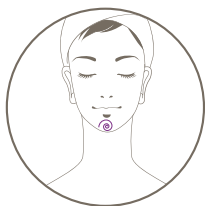

Устройство

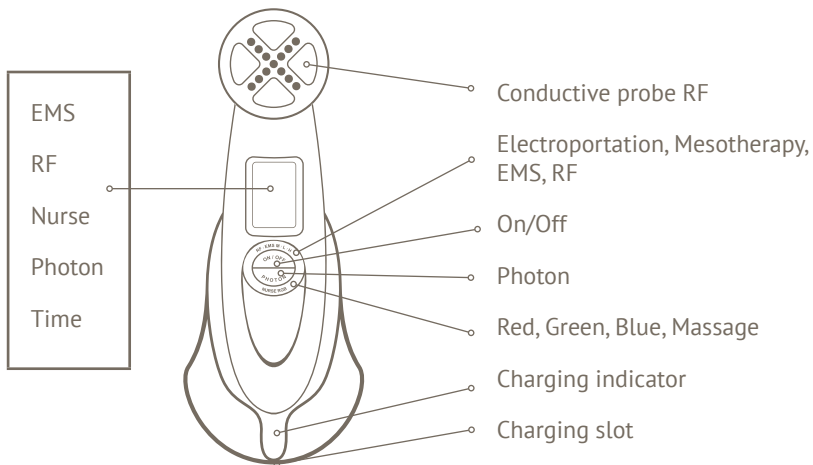

EMS	Электромиостимуляция
RF	RF-лифтинг
Nurse	Массаж
Photon	Фотон (квантовая терапия, выбор режимов при повторном нажатии - красный, синий, зеленый)
Time	Время
Conductive probe	Проводящий зонд

ONN/OFF	Включение/ выключение
Charging indicator	Индикатор зарядки
Charging slot	Гнездо для зарядки

Данный прибор поставляется с литиево-ионной батареей. Во время зарядки горит красный светодиодный индикатор, при завершении зарядки он начинается светиться зеленым.

Предупреждение

- Перед применением аппарата необходимо снять ювелирные изделия, часы.
- Запрещено разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно.
- Если аппарат искрит, раздаются нехарактерные звуки, свяжитесь со специалистами сервисного центра.
- Аппарат предназначен только для личного использования.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Общие:

- Острый воспалительный процесс, температура.
- Болезни крови
- Тромбофлебиты
- Нарушения сердечного ритма
- Онкологические заболевания
- Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы

- Беременность

Местные:

- Рак кожи
- Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов, имплантированных в кости и ткани.
- Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в период обострения)

Технические характеристики

Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Длина волн при обработке светом: 415 нм/525 нм/ 630 нм

Размер изделия: 17,5 x 4.5 x 4.0 см

Размер упаковки: 20,4x24,4x8,4см

Комплектация: упаковка, устройство, адаптер, защитные очки, подставка, инструкция.

Вес изделия: 100 г

Мощность: 3 Вт



Завод-изготовитель:

Shenzhen Perfect Idea Tech. CO., Ltd., China/ Перфект Идея, Шэньчжэнь, Китай

Импортер:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

Телефон сервисного центра:

+7 (495) 774-57-14

www.welss.ru

